



STRÖME

Vitality Vibes CL-F055

-jalkahieroja
-fotmassagerare



Turvallisuusohjeet


- Jos jokin osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta tai sähköjohtoa vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävillä aineilla.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen merkkikilvestä että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Laitetta tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta lääketieteellisen hoidon korvikkeena. Jos olet hoitosuhteessa, keskustele lääkärisi kanssa laitteen käytöstä.
- Laitteessa on irrotettava kangaspäällinen, jonka voi pestä käsin tai pesukoneessa. Noudata pesulappuun merkittyjä ohjeita.

Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Ströme Vitality Vibes CL-F055
Ajastin	5, 10 tai 15 minuuttia
Esiasetetut hierontaohjelmat	3 kpl
Koko	400 x 390 x 302 mm
Paino	6,2 kg
Jännite ja virta	100–240 V 50/60 Hz 1,0 A
Irrotettava kangas	Kyllä
Lämmitys	Kyllä
Kengänkoko	≤ 45



Käyttö

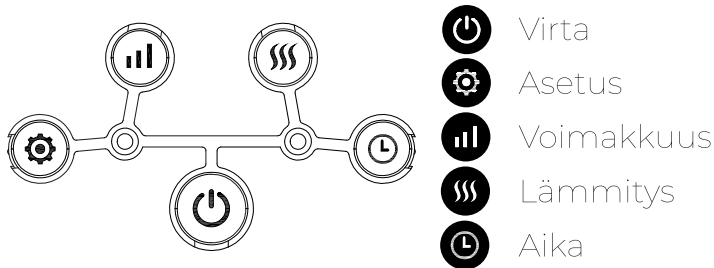

Ohjauspaneelin painikkeet

Virta:

- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Nosta kansi pois laitteen päältä.
- Paina virtapainiketta. Laite käynnistyy.

Asetus:

- Asetuspainike vaihtaa esiasetetun hierontaohjelman.
- Laitteessa on kolme ohjelmaa.
- Kun painat painiketta, laitteen merkkivalo vaihtaa väriä.

Voimakkuus:

- Voimakkuuspainike muuttaa ilmanpaineen voimakkuutta.
- Laitteessa on kolme voimakkuutta.
- Kun painat painiketta, laitteen merkkivalo vaihtaa väriä.

Lämmitys:

- Lämmityspainike käynnistää ja sammuttaa lämmityksen.

Aika:

- Aikapainike muuttaa ohjelman kestoa.
- Laitteessa on kolme erilaista kestoa: 5, 10 ja 5 minuuttia.
- Kun painat painiketta, laitteen merkkivalo vaihtaa väriä.

Asetus 1 / Voimakkuus 1 / 15 minuuttia	Sininen valo
Asetus 2 / Voimakkuus 2 / 10 minuuttia	Vihreä valo
Asetus 3 / Voimakkuus 3 / 5 minuuttia	Punainen valo

Laitteen käyttö:

1. Aseta jalkasi hierontalaitteen aukkoihin. Rentouta jalkasi.
2. Valitse haluamasi asetus, voimakkuus, lämmitys ja aika.
3. Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen.

Hoito ja säilytys

- Irrota virtajohto virtalähteestä käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja säilytystä.
- Irrota laitteen kangas ennen sen puhdistamista. Voit pestä kankaan käsin lämpimällä vedellä ja pesuaineella tai pesukoneessa 30 asteessa. Noudata pesulappuun merkittyjä ohjeita.
- Pyyhi laitteen pinnat kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu säilytyksen aikana.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle, tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävillä aineilla säilytyksen aikana.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Hierontalaite ei toimi.	Laitteessa ei ole virtaa.	Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
Yhtäkkinen pysähdys.	Laitteessa ei ole virtaa.	Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
	Ajastin on sammuttanut laitteen automaattisesti.	Käynnistä laite uudelleen.
	Laite on ylikuumentunut.	Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta. Anna laitteen viilentyä vähintään 15 minuutin ajan.
	Hierontapäät eivät pääse liikkumaan.	Rentouta jalat. Varmista, ettei laitteessa ole ylimääräisiä esineitä.

Säkerhetsanvisningar


- Om en del av apparaten går sönder, var i kontakt med en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare. I produkten finns inga delar som kan underhållas av användaren.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Produkten ska användas endast i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten eller kabeln för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan orsaka elektriska stötar. Kontrollera etiketten för att säkerställa att laddningsplatsen tillåter att den förses med den spänning den kräver.
- Apparaten ska användas och förvaras i rumstemperatur.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Använd inte apparaten i stället för medicinsk vård. Om du är i en medicinsk behandling, tala med din läkare om apparaten.
- Apparaten har en avtagbar tygbeläggning. Du kan tvätta beläggningen för hand eller i tvättmaskin. Följ anvisningarna på tvättetiketten.

Teknisk information

Märke och modell	Ströme Vitality Vibes CL-F055
Timer	5, 10 eller 15 minuter
Förinställda massageprogram	3 st
Mått	400 x 390 x 302 mm
Vikt	6,2 kg
Spänning och effekt	100–240 V 50/60 Hz 1,0 A
Avtagbar beläggning	Ja
Uppvärmning	Ja
Fötternas storlek	≤ 45



Användning

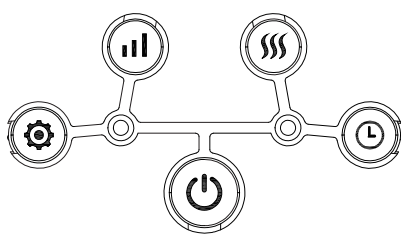

-  Ström
-  Inställning
-  Intensitet
-  Uppvärmning
-  Tid

Knapparna på kontrollpanelen

Ström:

- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Ta bort locket.
- Tryck på strömknappen. Apparaten startar upp.

Inställning:

- Inställningsknappen byter massageprogram.
- Apparaten har tre program.
- Indikatorljuset byter färg när du trycker på knappen.

Intensitet:

- Intensitetsknappen byter lufttryckets intensitet.
- Apparaten har tre intensiteter.
- Indikatorljuset byter färg när du trycker på knappen.

Uppvärmning:

- Uppvärmningsknappen sätter på och stänger av uppvärmningen.

Tid:

- Tidsknappen byter den inställda tiden.
- Apparaten har tre tidsinställningar: 5, 10 och 5 minuter.
- Indikatorljuset byter färg när du trycker på knappen.

Inställning 1 / Intensitet 1 / 15 minuter	Blått ljus
Inställning 2 / Intensitet 2 / 10 minuter	Grönt ljus
Inställning 3 / Intensitet 3 / 5 minuter	Rött ljus

Användning:

1. Sätt dina fötter till hålen i apparaten. Slappna av fötterna.
2. Välj inställning, intensitet, uppvärmning och tid.
3. Koppla bort stickkontakten från eluttaget efter användning.

Skötsel och förvaring

- Koppla bort strömkabeln från strömkällan efter användning samt före rengöring och förvaring.
- Ta av tygbeläggningen innan du rengör den. Du kan tvätta beläggningen för hand med varmt vatten och tvättmedel eller i tvättmaskin i 30 grader. Följ anvisningarna på tvättetiketten.
- Rengör apparatens ytor med en torr, mjuk duk. Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Förvara apparaten i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Se till att strömkabeln inte skadas under användning.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller andra vätskor, eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen under förvaringen.

Problemlösning

Problem	Orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Apparaten har ingen ström.	Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
Apparaten stänger av sig plötsligt.	Apparaten har ingen ström.	Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
	Timern har stängt av apparaten automatiskt.	Starta om apparaten.
	Överhettning.	Koppla bort strömkabeln från eluttaget och låt apparaten svalna i minst 15 minuter.
	Massagestyckena kan inte röra sig.	Slappna av dina fötter. Se till att det inte finns övriga föremål i apparaten.



STRÖME

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfalls-sorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronik-handel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan
00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

13603368 2024